

Einsatz:



Der Einsatz von Medipolan erfolgt bei nachstehenden Indikationen:

- Degenerative Erkrankungen im Sinne von Arthrosen der oberen Sprunggelenke, der Kniegelenke, Schultergelenke und Ellenbogengelenke.
- Reizzustände an Kapsel und Bändern verschiedener Gelenke (z. B. Kniegelenk).
- Überlastungszustände an Sehnen und Sehnenansätzen im Bereich der Sportmedizin.
- Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises.

Erfahrungen:

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß bei allen Schmerzzuständen, nach Sportverletzungen, bei Überlastungsschäden der Sehnen und Sehnenansätze, bei Arthrosen und Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises, die Anwendung von Medipolan angezeigt erscheint. Außer einer analgesierenden (schmerzlindernden) Wirkung ist entsprechend den anerkannten Wirkungsweisen des elektrischen Feldes auch ein echter Therapieerfolg zu erwarten.

Im Gegensatz zu der nur kurzfristigen Anwendung bei der üblichen Elektrotherapie trägt der Patient sozusagen sein Behandlungsgerät ständig mit sich herum, was auch mit erklärt, warum trotz geringer Energiedichte gute und dauerhafte Behandlungserfolge zu beobachten sind.

Nebenwirkungen wurden in keinem Fall beobachtet.

MEDIPOLAN WIRKT!

MEDIPOLAN - ENERGIE GEGEN SCHMERZEN

Die Schmerz-Problemzonen



PZ-Nr. 301 351 7

Hals / Nacken



PZ-Nr. 301 344 0

Kniegelenk



PZ-Nr. 301 348 6

Wirbelsäule / Kreuz



PZ-Nr. 301 340 5


Schulter / Arm

Nebenwirkungsfrei hilft hier MEDIPOLAN mit sanfter elektrostatischer Energie – unabhängig und mobil für neue Lebensqualität.

MEDIPOLAN bei
 Gelenkbeschwerden
 Wirbelsäulenerkrankungen
 Sportverletzungen
 Rheuma



Die ständig voranschreitende Entwicklung in der Medizin hat die Lebenserwartung der Menschen in den letzten hundert Jahren verdoppelt. Die Natur hat uns aber nur für eine Lebensspanne von etwa 45 Jahren ausgerüstet; die Folgen sind, vor allem im fortgeschrittenen Alter, Schmerzen aufgrund allgemeiner **Verschleißerscheinungen**.

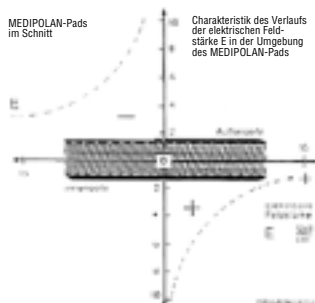

In Deutschland leiden rund 5 Millionen Menschen Tag und Nacht unter starken Schmerzen. So sind z.B. Erkrankungen rheumatischer Art in der Bundesrepublik die Volkskrankheit Nr. 1 und stehen lediglich als Oberbegriff für eine nur schwer überschaubare Vielfalt von Krankheitsbildern, die alle den **Bewegungsapparat des Menschen** - Gelenke, Knochen, Muskeln, Sehnen, Bänder und auch die **Wirbelsäule** - betreffen. Klassische Behandlungsmethoden sind seit jeher:

- die Behandlung mit Medikamenten,
- die physikalische Behandlung,
- operative Maßnahmen (z. B. Gelenkersatz).

Bei der Suche nach **alternativen Behandlungsmöglichkeiten** wurde die Entdeckung gemacht, daß bestimmte Formen der **elektrischen Energie**, am Körper direkt angewandt, Schmerzen lindern und Heilungsprozesse fördern können. **Die Elektrotherapie hat daher bei der Behandlung schmerzhafter Erkrankungen ihren festen Stellenwert.**

Sie war jedoch bisher gebunden an bestimmte technische Einrichtungen und Apparaturen.

Die Bemühungen, hiervon unabhängig zu werden, führten zur Entwicklung der **MOBILEN-MEDIPOLAN-ELEKTROTHERAPIE**.

Empirische Befunde haben ergeben, dass **MEDIPOLAN** gegen das gefürchtete „Schmerzgedächtnis“ bei chronifizierten und auch bei „Phantomschmerzen“ wirkt, indem es den Kaliumfluss im Nervengewebe fördert und das gestörte Ruhepotential der Zellen stabilisiert. Dabei lösen sich auch muskuläre Spannungen ohne den Muskeltonus zu verringern. Neben den Schmerzen verbessern sich auch die verbreiteten Schlafstörungen deutlich – während vor der Behandlung fast 3/4 der Patienten mit akuten oder chronischen Schmerzen kaum Schlaf fanden, war es nach der Anwendung von **MEDIPOLAN** nur noch jeder siebte.



Der Produkteinsatz

I. Allgemeine Anwendungsbereiche

- Schmerzen und Bewegungsbeeinträchtigung
- Durchblutungsstörungen
- Schleimbeutelreizungen
- Nach Operationen zur Beschleunigung des Heilprozesses, z. B. nach Gelenkersatz
- Phantomschmerzen
- Kopfschmerzen, besonders Spannungskopfschmerzen

II. Sportmedizinische Anwendungsbereiche

- Bänderdehnungen und -zerrungen
- Schmerzen nach Verletzungen
- Überlastungsschäden
- Muskelverspannungen
- Muskelkater
- Muskelkrämpfe und -zerrungen
- Muskelfaserrisse und -anrisse
- Sehnen- und Muskelreizungen
- Sehnscheidenentzündungen

III. Arthrose und Rheuma

- Arthrose und Arthritis
- Chronische und degenerative Gelenk- und Bindegewebs-erkrankungen
- Ischias-Beschwerden
- Weichteilrheuma

Durch Dosisreduktion weniger Spätfolgen = Erhaltung der Lebensqualität.

Arthrose: Abnutzung in den Gelenken

Arthritis: Entzündung in den Gelenken

Ökologische Aspekte

Ökologie als Unternehmensphilosophie

Medipolan vereint sowohl einen ethischen und sozialen als auch einen ökologischen Anspruch in Form der nebenwirkungsfreien Anwendung, der Herstellung aus umweltfreundlichen Materialien, der ebenso umweltgerechten Verpackung, der langfristigen Anwendbarkeit und der umweltfreundlichen Entsorgung.

Medipolan eignet sich für akute wie präventive Schmerzbehandlung. Die nebenwirkungsfreie Anwendung vermeidet medikamentöse Suchtgefahren und Spätfolgen durch Vergiftungen.

- Verwendung umweltverträglicher Materialien
- Baumwolle, ungefärbt, ungebleicht
- Schaumstoff, zerfällt unter UV-Bestrahlung und Sauerstoff in unschädliche Bestandteile
- Unschädliche Entsorgung
- Verpackung recyclebar, dto. Beipack
- Verwendung lösungsmittelfreier Farben
- Verzicht auf Metallkunststoff-Kombiverpackung (Blister)
- Reduzierung von Verpackungsmaterial
- Distribution / Versand im Verbund mit etabliertem homöopathischen Pharmaunternehmen
- Vermeidung unnötiger Zustellungen / Transporte
- Wirkprinzip ohne Nebenwirkungen - Vermeidung von Spätfolgen - z. B. Nierenversagen
- Medipolan macht Schmerzbehandlungen wieder bezahlbar
- Vermeidung von medikamentöser Suchtgefahr
- Möglichkeit der Dosisreduktion, evtl. sogar Verzicht auf Arzneimittel. Hilft die Arbeitsfähigkeit zu erhalten und Frühverrentung zu vermeiden.

Medipolan:

**Nebenwirkungsfrei.
Patientengerecht.
Langlebig.
Kostengünstig.**

Das Funktionsprinzip

- **MEDIPOLAN-Pads** besitzen ein dauerhaftes elektrostatisches Feld und dessen spezifische Wirkeigenschaften.
- **MEDIPOLAN-Pads** besitzen ein negatives Feld auf der körperabgewandten Seite, ein positives Feld auf der körperzugewandten Seite.

Die Wirkungsweise

- Der Hauptangriffspunkt des elektrostatischen Feldes der **MEDIPOLAN-Pads** ist die Nervenzelle.
- Durch die Reizung der Zelle wird die Zellmembran zeitweise durchlässig. Natrium-Ionen wandern durch die Membran in das Zellinnere, Kalium-Ionen verlassen die Zelle: Umkehr des Membranpotentials = Depolarisation.
- Dies geschieht z.B. auch im rheumatischen Krankheitsprozeß.
- Das elektrostatische Feld der **MEDIPOLAN-Pads** ist ausgelegt auf eine Stabilisierung der Zellmembran: Die Depolarisation wird gebremst.
- Das Ergebnis der gebremsten Depolarisation ist eine **verminderte nervale Ansprechbarkeit** = Schmerzlinderung.

Sanfte elektrostatische Energie reduziert Schmerzen schnell auf ein erträgliches Maß – ohne Nebenwirkungen.



beweglich und aktiv mit MEDIPOLAN!

Neueste Erkenntnisse aus der **Quanten- und Energiemedizin** bestätigen den Therapieansatz von Medipolan: Der Körper wird in der „**Neuen Medizin**“ als Energiefeld verstanden, und jede Krankheit beruhe daher auf einer Störung der energetischen Felder. Nach **Nordenström**, einem langjährigen Mitglied der **Nobelkommission**, verfügen wir mit dem „Kreislauf der Bio-Elektroströme“ über ein weiteres, vom zentralen Nervensystem unabhängiges bioelektrisches Kreislaufsystem. Eine Therapie mit den **Medipolan-Energy-Pads**, wie auch die herkömmliche Elektrotherapie, beeinflussen genau dieses bioelektrische Kreislaufsystem, das durch das Auftreten von Schmerzen im Bewegungsapparat eine vorliegende Störung signalisiert. Die elektrostatischen Felder der **Medipolan-Energy-Pads** kommunizieren mit den körpereigenen Feldern. Das **bioenergetische Potential** der Zellen wird wiederhergestellt. Die **Mikrozirkulation** und damit der Stoffwechsel werden wieder in Gang gesetzt bzw. verstärkt. Schadstoffe und Schlacke werden ab- und Sauerstoff und Nährstoffe herantransportiert. Die Beweglichkeit der betroffenen Muskulatur und Gelenke ist wieder möglich. Die **Selbtheilung** des Körpers setzt ein.



ohne Steckdose ohne Batterien ohne Kabel einfach anzulegen waschbar unter der Kleidung zu tragen Anwendung bei Tag und Nacht

Die Wirkqualitäten

- **MEDIPOLAN** lindert rasch die Beschwerden häufig bis zum völligen Verschwinden des Schmerzes.
- **MEDIPOLAN** entspannt die **verkrampfte Muskulatur**. Dies wiederum führt zu einer **besseren Durchblutung** des Muskelgewebes.
- **MEDIPOLAN** erzeugt an den behandelten Körperstellen **körpereigene Wärme aufgrund der geförderten Durchblutung**. Diese Wärmeproduktion ist jedoch auf keinen Fall gleichzusetzen mit einer äußeren Wärmewirkung wie etwa durch Rheuma-Wäsche.
- **MEDIPOLAN** aktiviert die Körperenergien dort, wo es angelegt wird. Die Folge: **weitestgehende Normalisierung der gestörten Stoffwechselfunktion**.

mehr Lebensqualität dank MEDIPOLAN!

Alle Schmerzen, die wir empfinden, sind nichts anderes als elektrische Impulse, die durch unsere Nervenfasern rasen. Ein unendlich komplexes Netzwerk von Nerven, das praktisch jede Zelle im menschlichen Körper erreicht und das wir heute erst zum Teil verstehen. Medipolan wird von einem elektrostatischen Feld umgeben das in das Geschehen eingreift und die Schmerzen zu lindern vermag. Wie genau, weiß die Wissenschaft noch nicht. Dies ist nichts Ungewöhnliches in der Medizin. Bis heute ist beispielsweise auch noch nicht bekannt, wie ein Gedanke in unserem Gehirn entsteht, und dennoch denken wir. Was zählt, ist das Ergebnis.

- Das energetische Potential von **MEDIPOLAN** ist ausgelegt auf eine
 - schmerzlindernde
 - entzündungshemmende
 - muskelentspannende Wirkung.

Die Vorteile

- **MEDIPOLAN** behält dauerhaft sein elektrostatisches Feld und muß nicht aufgeladen werden.
- **MEDIPOLAN** entfaltet seine volle elektrostatische Wirkung während des Tragens am menschlichen Körper. Der Patient kann seiner gewohnten Tätigkeit weiter nachgehen.
- **MEDIPOLAN** ist aufgrund seiner patientengerechten Ausstattung einfach und ohne weitere Hilfsmittel anzulegen.
- **MEDIPOLAN** wird für jede Körperregion angeboten.
- **MEDIPOLAN** ist frei von Nebenwirkungen.

Beweglich und aktiv für neue Lebensqualität ohne Nebenwirkungen



Der Schmerz als Signal

Der **Warner** und **Mahner** Schmerz ist mit der Entwicklung der Menschheit auf das engste verknüpft. Seine Beherrschung und Linderung gaben den Anstoß zur Notwendigkeit des Heilens und Behandelns.

Das Schmerzerlebnis hat immer eine individuelle Dimension. Es ist weder verallgemeinerbar noch in vollem Umfang subjektivier- oder meßbar, sondern stets von der Konstitution und jeweiligen Situation der einzelnen abhängig.

Das Riesenheer der Schmerzkranken, denen nicht geholfen wird, ist Beweis genug dafür, daß die Medizin dieser Herausforderung bisher nicht gewachsen ist – sei es aus diagnostischen, therapeutischen, organisatorischen oder sonstigen Gründen.

Anwendungsbereiche

- **MEDIPOLAN-Pads** werden mit der baumwollenen Seite zum Körper getragen, direkt auf der Haut, mit dem Wäschezeichen nach außen.
- **MEDIPOLAN-Pads** sollten grundsätzlich nachts mindestens bis zum Abklingen der Beschwerden getragen werden. Bei chronischen Beschwerden empfiehlt sich die Anwendung auch bei Tage unter der Kleidung.

PZ-Nr. 301 342 8 MEDIPOLAN- Füllling

Anwendungsbereiche:

- rheumatische Beschwerden an den Füßen
- schmerzende Füße infolge Überlastung
- kalte Füße aufgrund von Durchblutungsstörungen
- besonders zu empfehlen bei „stehenden“ Berufen

Etwa jeder fünfte bis sechste Bürger der Bundesrepublik Deutschland – so schätzt man – klagt über häufige Schmerzzustände, und eine beträchtliche Anzahl von ihnen leidet unter Dauerschmerzen.

Wenn Schmerzzustände länger andauern und/oder eine bestimmte Regelmäßigkeit annehmen, hat die **Selbstbehandlung** ihre Grenzen erreicht, und der Besuch beim Arzt oder Apotheker darf nicht weiter aufgeschoben werden.

Lassen Sie sich auch von Ihrem Apotheker bei allen Maßnahmen der **Selbstmedikation** fachkundig beraten. Stellen Sie als Verbraucher offen und gezielt Ihre Fragen. Die Apotheker sind gesetzlich zur ordnungsgemäßen Arzneimittelversorgung der Bevölkerung verpflichtet. Erörtern Sie mit Ihrem Apotheker, ob in Ihrem Fall ein Arztbesuch angezeigt ist.

Pflegehinweise

- **MEDIPOLAN-Pads** können mit Feinwaschmitteln bei max. 30 - 40° C gewaschen werden, **möglichst Handwäsche (keinen Weichspüler verwenden!)** Anschließend gut trocknen lassen (Wäschetrockner meiden. Verschleiß!).
- **MEDIPOLAN-Pads** haben durch die Verwendung hochwertiger Materialien bei richtiger Pflege eine lange Lebensdauer.
- **MEDIPOLAN-Pads** verlieren ihre Wirkung nur durch mechanische Zerstörung.

Beweglich und aktiv für neue Lebensqualität ohne Nebenwirkungen

Nebenwirkungsfrei · **MEDIPOLAN** · Energie gegen Schmerzen



PZ-Nr. 301 358 1
MEDIPOLAN-Kompresse I,
(ca. 20 x 35 cm)

Anwendungsbereiche:
universell verwendbar, zur
Auflage auf alle Körperbereiche

PZ-Nr. 301 359 8
MEDIPOLAN-Kompresse II,
(ca. 30 x 45 cm)

Anwendungsbereiche:
universell verwendbar, zur
Auflage auf alle Körperbereiche

**MEDIPOLAN ist einfach und ohne Hilfsmittel anzu-
legen, trägt nicht auf
und kann so auch unter der Kleidung bei
Arbeit, Sport und Freizeit getragen werden –
bei Tag und Nacht.**



PZ-Nr. 301 344 0
MEDIPOLAN-Kniegelenk

Anwendungsbereiche:
- Schmerzen und Bewegungs-
beeinträchtigung im Kniegelenk
- Entzündungen
- Bänderdehnungen
- Prellungen und Zerrungen
- Nachbehandlung operativer
Eingriffe
Schmerzen durch Verschleiß
und Abnutzung

PZ-Nr. 301 343 4
MEDIPOLAN-Knöchel

Anwendungsbereiche:
- rheumatische Beschwerden
- Sprunggelenkarthrose/
-arthritis
- Zerrungen
- Bänderdehnung
- Verstauchungen
- Achillessehnenreizung

Nebenwirkungsfrei · **MEDIPOLAN** · Energie gegen Schmerzen

Für jede Körperregion



PZ-Nr. 301 351 7
MEDIPOLAN-Hals/ Nacken

Anwendungsbereiche:
- Schmerzzustände im Nacken
- Schleudertrauma
Nachbehandlung
- Schiefhals
- Spannungskopfschmerz

PZ-Nr. 301 340 5
MEDIPOLAN-Schulter/ Arm, einfach

Anwendungsbereiche:
- Schmerzen im Schultergelenk
- Entzündungen im
Schultergelenk
- Beeinträchtigung der
Beweglichkeit
- rheumatische Beschwerden

**Der Schmerz wird da bekämpft wo er sitzt – keine
"Totaltherapie" auch der gesunden Körperregionen.**



PZ-Nr. 301 352 3
**MEDIPOLAN-Schulter/ Arm,
doppelt**

Anwendungsbereiche:
- rheumatische Beschwerden
im Bereich der Halswirbelsäule
mit Ausstrahlung in Schulter
und Oberarm
- Schulter-Arm-Syndrom

PZ-Nr. 301 345 7
**MEDIPOLAN-Brustwirbelsäule
(BWS)**

Anwendungsbereiche:
- Schmerzen im Bereich der
Brustwirbelsäule
- Rücken- u. Schulterschmerzen

Beweglich und aktiv für neue Lebensqualität ohne Nebenwirkungen

Beweglich und aktiv für neue Lebensqualität ohne Nebenwirkungen

Nebenwirkungsfrei · MEDIPOLAN · Energie gegen Schmerzen



PZ-Nr. 301 337 4
MEDIPOLAN-Fäustling

Anwendungsbereiche:

- rheumatische Beschwerden an den Händen
- Fingersteifigkeit
- Bewegungsbeeinträchtigung und Schmerzen im Handgelenk



PZ-Nr. 397 521 6
MEDIPOLAN-Bettunterlage, groß
(ca. 130 x 200 cm)

ohne Foto:

PZ-Nr. 301 354 6
MEDIPOLAN-Bettunterlage, klein
(ca. 50 x 60cm)

Atmungsaktiv, leicht, anschmiegsam, hoher Tragekomfort durch angenehme Anwendung.

Nebenwirkungsfrei · MEDIPOLAN · Energie gegen Schmerzen



PZ-Nr. 301 339 7
MEDIPOLAN-Arm/Unterbein

Anwendungsbereiche:

- Weichteilrheumatismus im Bereich des Unterarms, Oberarms oder Unterschenkels
- Durchblutungsstörungen
- Zerrungen
- Sehnscheidenentzündung

Verkrampfungen werden gelöst, Entzündungsstoffe durch bessere Durchblutung abtransportiert.



PZ-Nr. 301 348 6
MEDIPOLAN-Lendenwirbelsäule (LWS) medium, (35 x 60 cm)

Anwendungsbereiche:

- Schmerzen und Bewegungsbeeinträchtigung im Bereich der Lendenwirbelsäule
- Lumbago (Hexenschuß)
- Bandscheibenleiden

ohne Foto:

PZ-Nr. 301 349 2 LWS groß, (45 x 80 cm)
PZ-Nr. 301 346 3 LWS klein, (25 x 40 cm)



PZ-Nr. 301 338 0
MEDIPOLAN-Handgelenk (Paar)

Anwendungsbereiche:

- Beschwerden im Handgelenk
- Handgelenkschwäche
- Zerrungen
- Vorbeugung gegen Sehnscheidenentzündung



PZ-Nr. 301 341 1
MEDIPOLAN-Arm / Ellenbogen

Anwendungsbereiche:

- Verrenkungen und Prellungen
- Zerrungen der Muskulatur
- Schleimbeutelentzündungen
- Epikondylitis („Tennis-Werfer-Golfer Ellenbogen“ – hier Anwendung mindestens 4 Wochen)



PZ-Nr. 301 350 0
MEDIPOLAN-Hüftgelenk

Anwendungsbereiche:

- Schmerzen und Bewegungsbeeinträchtigung im Hüftgelenk
- Hüftgelenk-Arthrose (Verschleiß)
- Nachbehandlung operativer Eingriffe (Implantationen)
- Leistenzerrungen

Beim Tragen erzeugt MEDIPOLAN ständig Energie in Form eines sanften Stromes



PZ-Nr. 301 357 5
MEDIPOLAN-Wickel (10 x 200 cm)

Anwendungsbereiche:

- Für alle Zwecke, ähnlich einer „elastischen Binde“ verwendbar

Beweglich und aktiv für neue Lebensqualität ohne Nebenwirkungen

Beweglich und aktiv für neue Lebensqualität ohne Nebenwirkungen